

AX-2006寒天印象材溶解攪拌機

取扱説明書


製品説明：

AX-2006 寒天コンディショナーは、歯科技工所において、鋳型製作用の複製用ゲルを溶融・混合するために使用されます。本機はAX-2002 寒天コンディショナーから改良されたモデルであり、デジタル制御システムにより操作が格段に容易になりました。

仕様：

電圧	AC 220V / 110V 50Hz / 60Hz ±10%
回転数	40rpm
消費電力	800W
容量	3L～5L
外形寸法	37×29×52 (cm)

図：

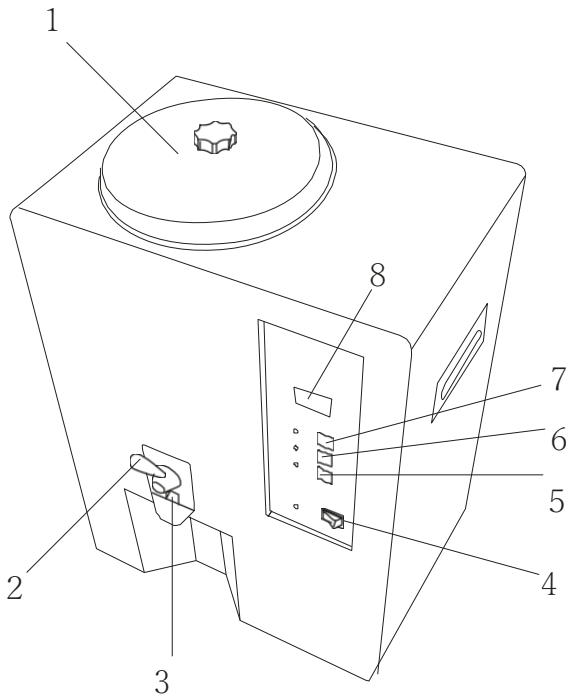

- 1. 蓋
- 2. ジェル排出口スイッチ
- 3. ジェル排出口
- 4. 電源
- 5. 攪拌ボタン
- 6. 保温ボタン
- 7. 加熱ボタン
- 8. 温度

取扱説明：

1. 梱包を開封し、付属品がすべて揃っているか確認してください。本機を使用する前に、取扱説明書をよくお読みください。
2. タンクに3kg以上のゲルを入れてください（ゲルは1cm程度の小さな塊に切っておくこと）。
3. プラグをコンセントに差し込むと、電源インジケーターが点灯します。
4. 電源を入れると、温度インジケーターにタンク内の温度が表示されます。「Heat」ボタンを押すと、加熱インジケーターが点灯し、本機の加熱が始まります。温度が88℃に達すると、保温が始まります。加熱インジケーターが消え、保温インジケーターが点灯します。その後、温度は下がり、48℃～59℃に保たれます。温度が28℃～59℃のときは中速で攪拌が始まり、60℃を超えると最高速度で攪拌が始まります。
5. 本機を使用しないときは、電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
6. 保温ボタンをいつでも押すと、加熱が停止し、保温が開始されます。このボタンをもう一度押すと、保温が停止します。
7. 「加熱」および「保温」ボタンが押されていない状態で「混合」ボタンを押すと、モーターの動作確認ができます。
8. ゲルを使用するには、ゲル排出スイッチをオンにしてください。
9. 本機を操作する前に、タンク内にゲルが残っていないか確認し、スプーンなどで取り除いてください。

注意事項：

1. 本製品は電気加熱装置であり、複製用ゲルは非常に高温になる場合があります。火傷を防ぐため、取り扱いには十分ご注意ください。
2. 操作前に、各ボタンの図と機能をよく確認してください。
3. 本機には最大3kgのゲルを投入できます。タンク内に複製用ゲルがない状態で本機を起動しないでください。
4. タンク内に固まったゲルがある場合は、攪拌を開始しないでください。ゲルはタンクから取り出し、細かく切ってから再度使用してください。ゲルの50%以上が溶けた状態でなければ、ミキサーを起動しないでください。そうしないと、モーターが焼損する恐れがあります。
5. 装置を再起動する前に、最高温度を確認してください。

付属品：

取扱説明書	1PC
電源コード	1PC
ヒューズチューブ（5A）	2PCS

連絡先
kashika.jp@gmail.com
URL:<https://www.kashika.jp/>